

EA763AH-43B



歯ブラシで取り切れない汚れまで、水流洗浄。  
約3日間で、歯ぐきの健康を推進\*1\*2。

防水・コードレスモデルでお風呂でも使えます。


充電式	タンク容量 約200ml	水圧レベル 5段階	給水1回での 連続使用時間*3 (水圧レベル5設定時)	超音波水流ノズル 約1分 ポイント磨きノズル 約55秒
-----	-----------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------------

\*1 超音波水流ノズル使用時のみ。

\*2 EW-DJ53水圧レベル5にて検証。当社調べ、使用効果は条件により異なります。

\*3 使用条件により、持続時間は異なります。


## EW-DJ53の特長

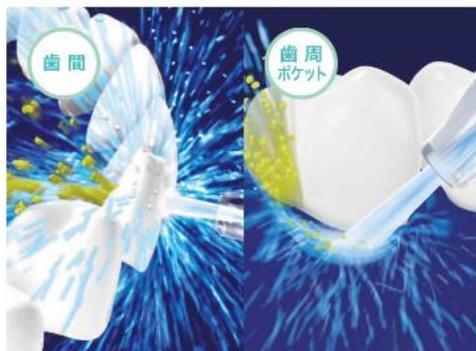

歯間・歯周ポケットの汚れを、水流洗浄ですみずみまで除去

歯と歯の間に詰まった食べかすを弾き飛ばし、歯周ポケット内の汚れまで洗い流す。


▽ 詳しく見る

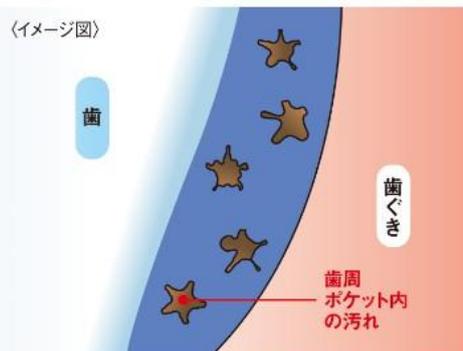

約3日で、歯ぐきの健康を推進\*1\*2

歯周ポケット内の汚れをすみやかに洗い流し、約3日で歯ぐきの健康を推進\*1\*2。


▽ 詳しく見る

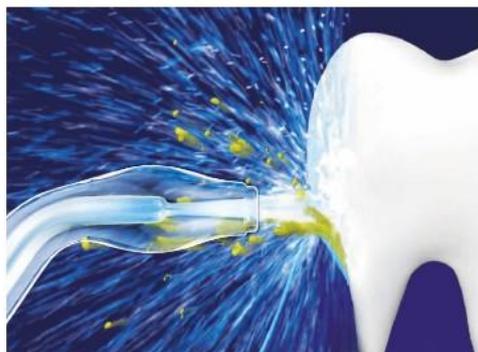

パナソニック独自の技術「超音波水流<sup>※3※1</sup>」で、歯の表面の汚れまでパワフル除去

独自技術で衝撃波を発生させ、歯の表面の汚れを剥がし飛ばす。

▽ 詳しく見る

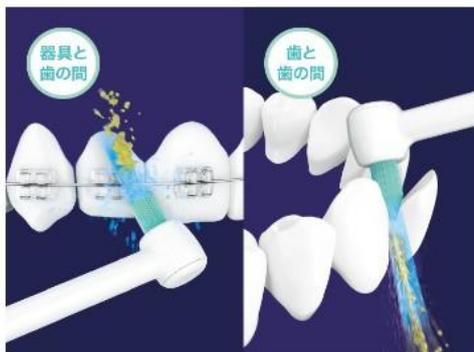

ブラシ×水流<sup>※4</sup>で、歯並びの悪い歯間や矯正器具まわりの頑固な汚れを除去


細かいすき間でも毛先を入れ込みやすいように円すい形状のブラシを採用。ブラシと水流<sup>※4</sup>で、汚れをダイレクトに除去。

▽ 詳しく見る



扱いやすい商品設計

▽ 詳しく見る

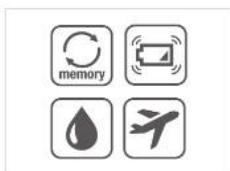

便利な機能一覧

▽ 詳しく見る



NEW 付属ノズル

▽ 詳しく見る



ジェットウォッシャー ラインアップ機能比較表

> 詳しく見る



ジェットウォッシャーの正しい使いかた

> 詳しく見る



相談しにくいお口のお悩み、スッキリさせたい方へ


> 詳しく見る

## 歯間・歯周ポケットの汚れを、水流洗浄ですみずみまで除去

歯間や歯周ポケット内など、歯ブラシで取り切れない汚れを、水流洗浄で除去します。


### 歯と歯の間に詰まった食べかすまで弾き飛ばす

パワフルなジェット水流により、ブラッシングでは取り切れない歯間の汚れや、食べかすを弾き飛ばし、しっかり洗い流します。

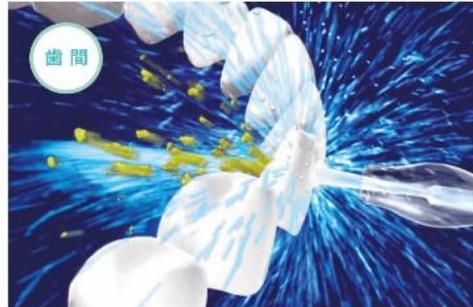

### 歯周ポケット内の汚れまで洗い流す

歯周ポケット内の見えない汚れや、ブラッシングによって歯周ポケット内に剥がれ落ちた歯垢までしっかり洗い流します。

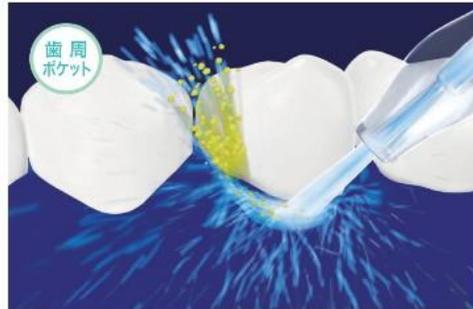

### Check!

歯磨き後は、水流洗浄で歯間・歯周ポケットケアを

きれいに歯磨きをしたつもりでも、歯間や歯周ポケットには、実は、取り切れなかった汚れが残っています。歯磨き後に、ジェットウォッシャーで、歯間や歯周ポケットの見えない汚れまでしっかり洗浄しましょう。


※顎模型と疑似汚れによる、洗浄検証の結果です



## 約3日で、歯ぐきの健康を推進※1※2

歯と歯ぐきの境目の歯周ポケットを磨くと、歯周ポケット内のプラークが剥がれます。剥がれたプラークは歯周ポケット内に残っていますので歯磨き後にしっかり洗い流す必要があります。

ジェットウォッシャーなら歯周ポケット内の汚れをすまやかに洗い流す事ができ、約3日間で歯ぐきの健康を推進※1※2します。(歯科大学による臨床試験済)

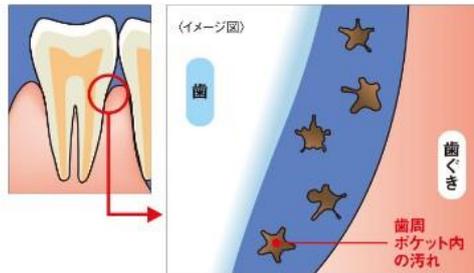

## パナソニック独自の技術「超音波水流※3※1」で、歯の表面の汚れまでパワフル除去


独自技術の超音波水流※3※1で、歯の表面の汚れを剥がし飛ばします。

■ 気泡が弾ける際の衝撃波が汚れを剥がし飛ばす

①水の通り道を絞ることによって水流の圧力が変化し、小さな気泡を生成

②気泡が崩壊することによって衝撃波が発生し、汚れを剥がし飛ばす

※ノズルの仕様は商品により異なります。

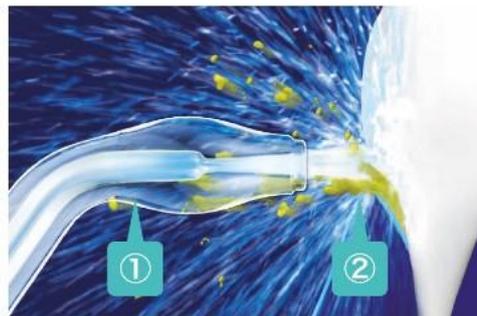

### 人工歯垢の除去試験※5 (当社調べ)


#### ① 独自技術

- 超音波水流※3※1

※丸で囲った部分は、超音波水流※3※1で人工歯垢が取れた部分

#### ② 当社従来技術

- 水流のみ

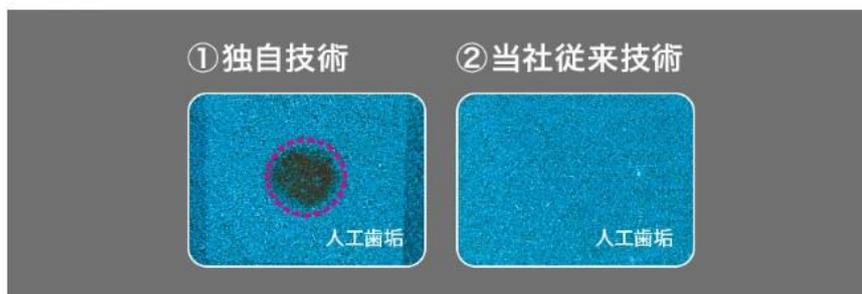

## ブラシ×水流<sup>※4</sup>で、歯並びの悪い歯間や矯正器具まわりの頑固な汚れを除去

【矯正器具と歯の間や歯間に入り込みやすいように毛先が円すい形状になったブラシと「水流」で、歯並びの悪い歯間や矯正器具まわりの汚れをダイレクトに除去します。

毛先が入り込みやすい円すい形状のブラシを採用。ブラシと水流<sup>※4</sup>で細かい部分の汚れもしっかり除去

器具と歯の間



歯と歯の間



## 扱いやすい商品設計

5段階の水圧調整や急速1時間充電など、扱いやすい商品設計です。



防水・コードレスモデル

本体は清潔まるごと水洗い。お風呂でも使えます。



タンク(約200mL)

1回の給水で約60秒間使用可能<sup>※6</sup>です。(超音波水流ノズル時)



5段階の水圧調整

お好みに合わせて水圧が選べます。メモリー機能付き。



急速1時間充電

置くだけでカンタンに1時間でフル充電<sup>※7</sup>が完了します。

## 便利な機能一覧

水圧レベル記憶機能や充電催促機能など、便利な機能を搭載しました。



### 水圧レベル記憶機能

前回使用した水圧レベルからスタートできます。



### 充電催促機能

充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。



### 本体防水設計<sup>※8</sup>

IPX7等級<sup>※8</sup>検査をクリアしています。



### 海外・国内両用<sup>※9</sup>

海外電圧対応(AC100-240V)です。