

Richbond
品番：SX-03

サクションX


取扱説明書

詳しくは→



万が一の時に、説明書を読む余裕はありません。
必ず、前もって正しい使い方を頭に入れて備えて下さい。
また、本製品はあくまでも、応急処置用ですので、処置後は医師の診断を必ず受けて下さい。


各 部 名 称

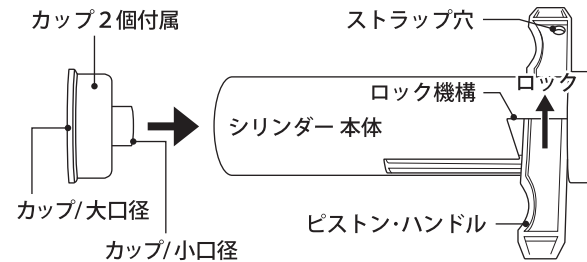

カップの取り付け

- 大口径と小口径がありますので、どちら側を使うか、患部にあわせて選び、セットして下さい。
- 子供の手や、大人の指には小口径が向いています。

カップは上下で2サイズで使用できます

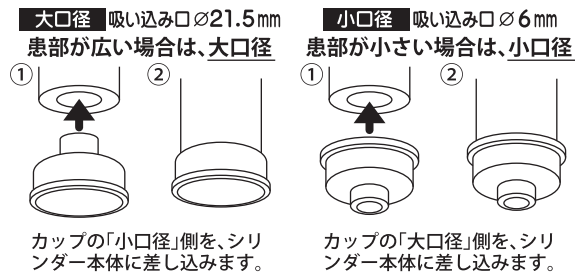

吸引する前に

① かまれたり、刺されたりしても、絶対に慌てない

- 動くとも血液の循環がよくなり、毒素のまわりが早まります。


② やたらに傷口を切らない

- ナイフやピンセットで傷口を広げないで下さい。雑菌が入るなど危険です。
- 傷口付近に体毛がある場合は、吸引効果を高めるため、安全カミソリ等で毛を剃って下さい。

吸 引 方 法

ピストン・ハンドルを引き上げて、ロックします。

ロックを外せば、ハンドルは下がります。

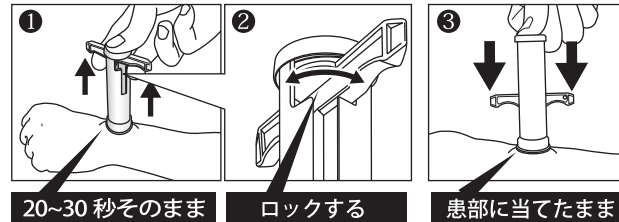

- ① ①と②の図を参考に、カップを患部にあて、ピストン・ハンドルを引き上げてロックし、20~30秒ほどそのままにしておきます。
- ② カップ内に皮膚が吸引されます。
- ③ ピストン・ハンドルのロックを解除すると、ピストン・ハンドルが自然に下がります。
ハンドルが戻らない場合は、カップが患部より離れないようにし、ハンドルを押し下げて、もう一度①から吸引を始めて下さい。
- ④ ①~③を繰り返して下さい。

吸引した後

- ① 最後にピストン・ハンドルから指を離し、引き上げるのをやめ、ピストン・ハンドルが元の位置まで戻ってから外します。
- ② 皮膚表面に出てきた毒液をキレイな水で洗い流し、消毒後、傷絆創膏を覆います。

⚠ 重 要 注 意

- ① きつく止血しようとししないで下さい。組織が壊死する等して、危険です。
- ② 吸引中に無理に外さないで下さい。毒液が飛び散ると危険です。
- ③ 毒蛇にかまれた場合は、吸引をより多く行って下さい。
- ④ 使用後はカップのみ洗い、消毒して下さい。シリンダー内が濡れると十分に吸引できません。
- ⑤ 携行する前に必ず、吸引テストをして、破損等がないかを確認して下さい。

⚠ その他の注意

- 皮膚の場所、または、体質によっては、吸引痕が赤く残る事があります。
- この商品の使用目的以外に使用しないで下さい。
- 子供の手が届く所に保管しないで下さい。

お問合せ：(株)リッチボンド info@richbond.jp