

耳にフィットして音がはっきり聞こえる

耳かけ集音器Ⅳ

左右両耳対応

会話

TV

観劇

講演会


外出時

アルカリボタン電池1個使用(テスト用電池1個付属)

耳かけ集音器Ⅳ

ご使用方法とご注意をよく
お読みになり、正しくご使用
ください。

内蔵マイクで音をキャッチ、高性能アンプで拡大します。

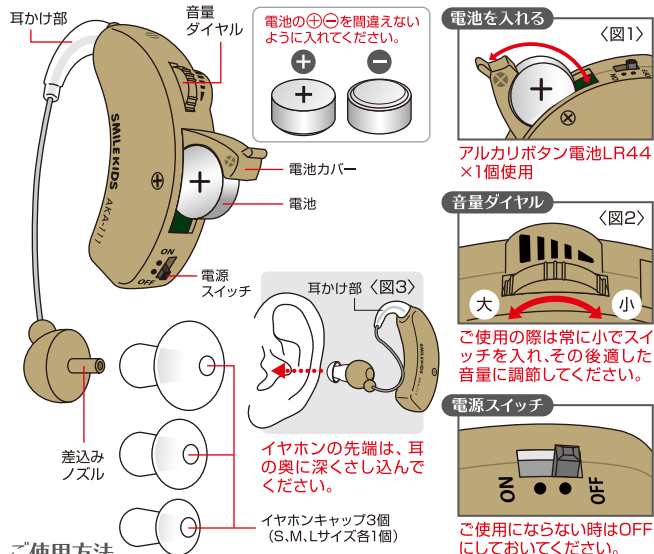

ご使用方法

- ① 指先で電池カバーを開いて電池を入れ、元通りに電池カバーを閉めてください。〈図1〉
 - ② 音量を最小に合わせてください。〈図2〉
 - ③ イヤホンキャップをノズルに付け、耳穴にきっちりさし込み、耳かけ部を耳にかけてく
ださい。〈図3〉スイッチを入れる前にイヤホンが正しく耳の中におさまっていることを
確かめてください。
 - ④ 電源スイッチをONにしてください。すると空気の流れる音が聞こえます。
 - ⑤ 音量ダイヤルを回して調節し、適したレベルまで徐々に音量を上げます。
- ※使用中に音が小さくなったり聞こえなくなった場合は、新しい電池と交換してください。

⚠ ご使用上の注意

- 音量は徐々に上げていく事が重要です。急激に音量を大きくするのは避けてください。
- この商品は聴覚障害の方のための補聴器ではありません。聴覚障害の方は医師にご相談ください。
- あまり大きな音量で使用しないでください。突然大きな音が入っても驚かない程度の音量で
使用してください。
- 音を拡大しますので、常時大きな音量で使用されますと、難聴や聴覚障害の原因となりますの
で、ご注意ください。
- 火気の近くでの使用や放置、落下や水濡れに注意してください。破損や故障の原因となります。
- 小さなお子さまの手が届く場所には、保管しないでください。

材 質	本体、イヤホン／ABS樹脂、 イヤホンキャップ／シリコン
サ イ ズ	本体／約4.5×0.95×2.4cm、 コード長(耳かけ部除く)／長さ約4cm イヤホン／約φ1.2×1.4cm
重 量	約6g
使用電池	アルカリボタン電池LR44×1個 (テスト用電池1個付属)
電池寿命	ボリュームを中にして連続使用で約120時間 (国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)
付 属 品	イヤホンキャップ3個(S、M、Lサイズ各1個)

保証規定 1.使用方法・ご使用上の注
意に従った正常な使用
状態で故障した場合は、お買い上げ
後1年間無料で交換いたします。
2.購入証明書(販売店のレシートなど)
をもって保証の適用とさせていただきます
ので、購入証明書は大切に保
存してください。
3.本保証は日本国内においてのみ有効
です。

※ご使用済みの電池は、リサイクルを
お願いします。
※本品の仕様及び外観は、改良のため
予告なく変更することがあります。
ご了承ください。

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

お問い合わせ先

〒518-0227 三重県伊賀市青山羽根142-3

TEL (0595) 52-2208

〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号

TEL (06) 6976-1371

受付 9:00～16:00(土日・祝祭日を除く)

2022.10 ©旭電機化成株式会社 MADE IN CHINA

紙
台紙：紙

ラ
ブリスター：PET

AKA-111
耳かけ集音器Ⅳ



4 962644 943784