

レスキューボードベンチ

Rescue Board Bench

テラモトが提案する
危機管理安全対策品

もしもに

備える

ベンチ

担架



緊急時には担架として応急活動に
使用できるハイブリッド・ベンチ。

災害時指定避難場所の備品として。

急病人や負傷者発生時に対応できる備品として。



操作説明用ツールも別途申し受けます。操作方法を分かりやすく説明。ベンチの側に提示することで緊急時に対応しやすくなります。詳しくは、弊社または係員までお問い合わせください。




メッセージボールパネル付

担架としての使用に耐えられる機能も充実しています。



要救助者を固定するベルト付
座面裏側に固定ベルトがセットされているので、搬送時に要救助者をしっかり固定できます。

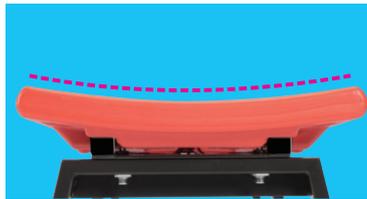

要救助者を優しく支える座面
要救助者の体を優しく包み込むように、座面はなだらかなアーチ形状になっています。



運びやすい持ち手
角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません。



ロック機構付
誤って座面が外れないようにロックが付いています。



ブルー



レスキューオレンジ



座面の取り外し方



本体に使い方を表示
脚部に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。

レスキューボードベンチ

お客様組立

材質 座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
ベンチ時サイズ 約W1780×D460×H380mm
担架時サイズ 約W1780×D430×H81mm
ベルト長さ 約1460mm(バックル部の端から端まで)
規格色 ブルー・レスキューオレンジ
重量 ベンチ時:約22.5kg、担架時:約7.5kg
耐荷重(目安) 約100kg(担架時)

品番	規格色	価格
BC-309-118-3	ブルー	¥52,000(税込¥57,200)
BC-309-118-5	レスキューオレンジ	¥52,000(税込¥57,200)

- お客様組立商品
- 必ず管理者のいる場所に設置してください。
- 定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。

塩ビ不使用 特許登録済 意匠登録済

現在も未来も物流の現場5S環境は、テラモトがトータルプロデュースします。

販売店

デジタルカタログ

TERAMOTO 株式会社テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29
TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23
TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658

名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118
横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>